

# 病毒檢測方案

## AP (VT\_V103\_C00) 使用說明


2020.04.28

# AP功能列表

- 顯示 AP 版本
- 取得影像 (兩種方式)
- 調整曝光時間和 Gain
- 儲存影像


# 顯示 AP 版本：

1. 點選左上小圖示
2. 點擊 “About SDK\_DEMO...”
3. 顯示 AP 版本 (VT-V103-C00)

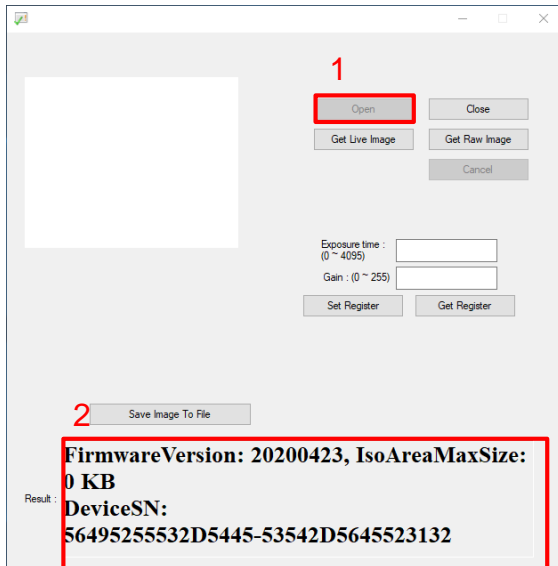

# 取得影像 (兩種方式) :


1. 點擊 “Open”
2. 顯示 FW 資訊

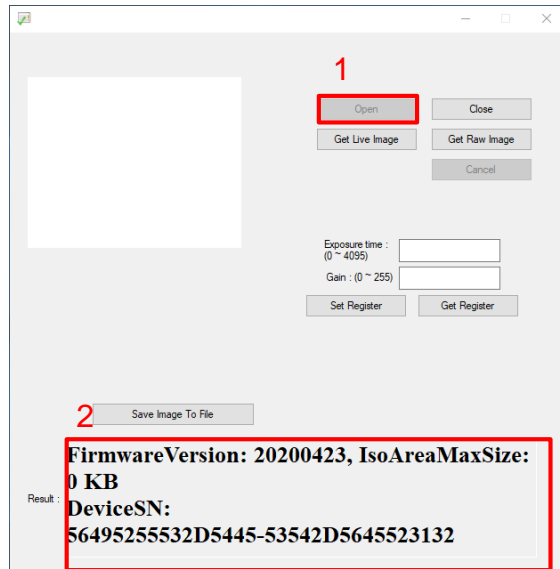


連續取影像




取一張影像

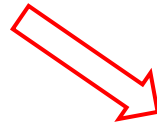

1. 點擊 “Get Live Image”
2. 連續取影像
3. 點擊 “Cancel”, 離開連續取影像模式

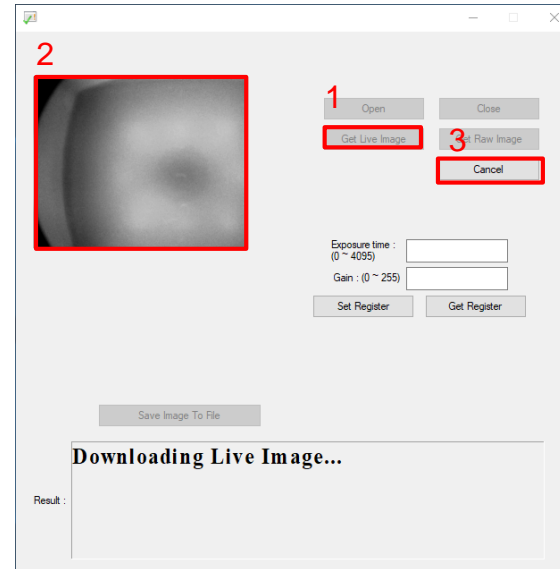


1. 點擊 “Get Raw Image”
2. 取一張影像

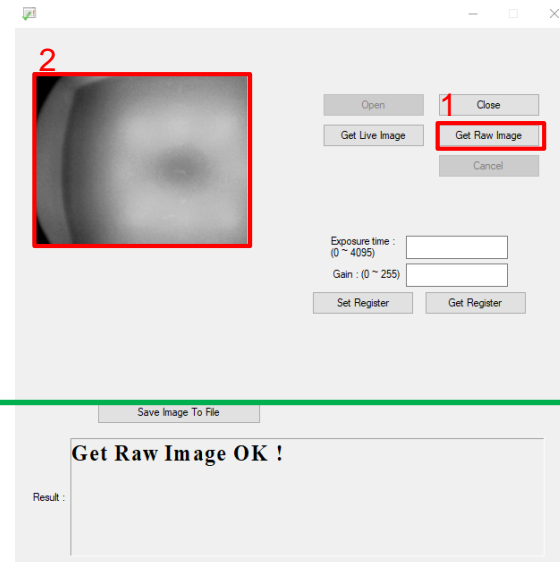


# 調整曝光時間和 Gain :


1. 點擊 “Open”
2. 顯示 FW 資訊

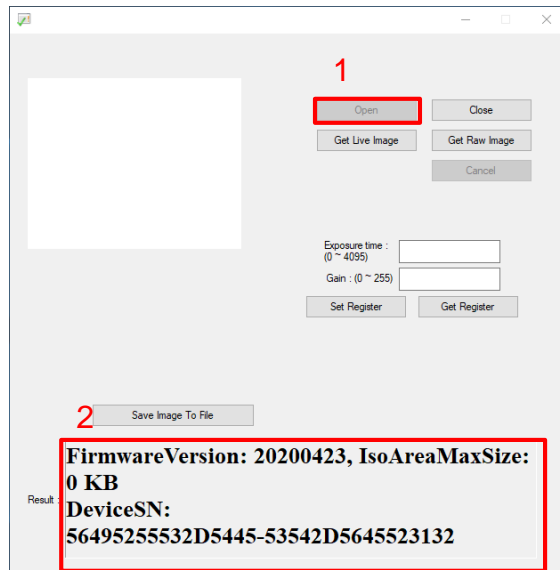


1. 點擊 “Get Register”
2. 取得目前的曝光時間和Gain值 (10進制)

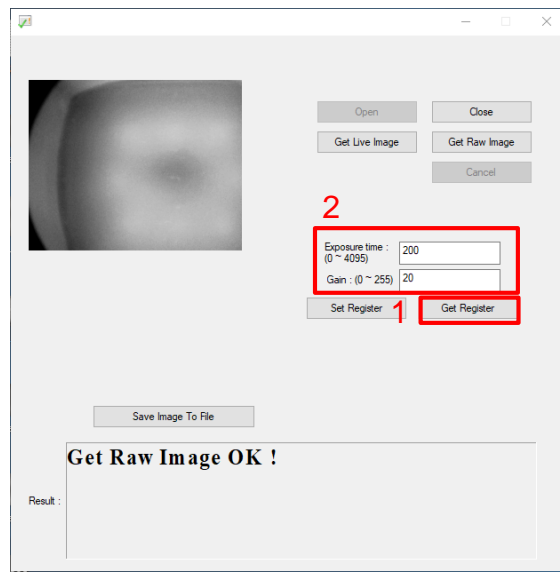

1. 點擊 “Get Raw Image”
2. 取一張影像

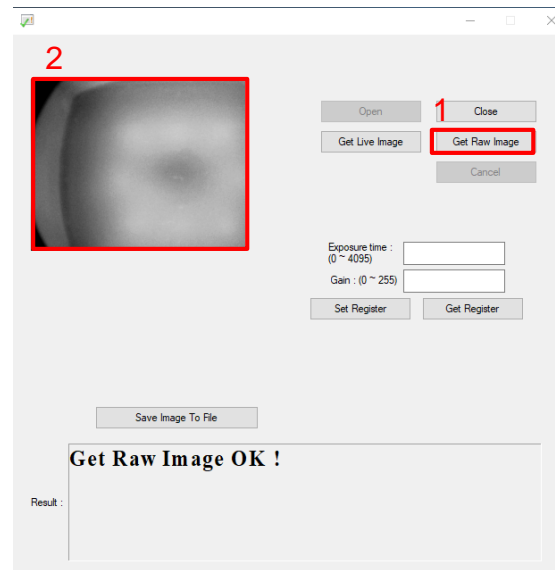


1. 修改曝光時間和Gain值
2. 點擊 “Set Register”
3. 點擊 “Get Raw Image”
4. 取得新影像

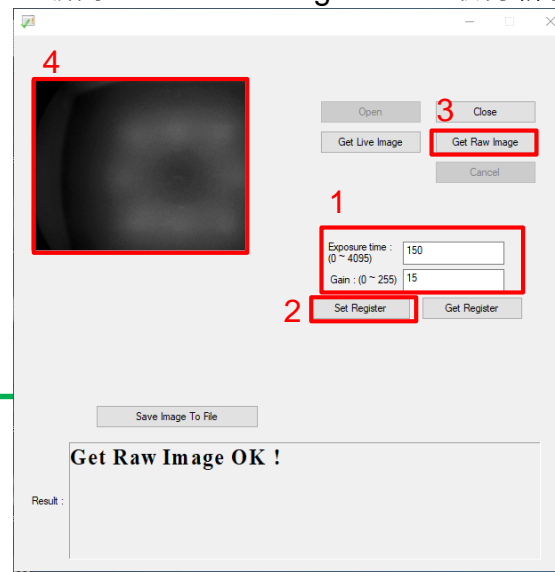


# 儲存影像：


1. 點擊“Open”
2. 顯示 FW 資訊

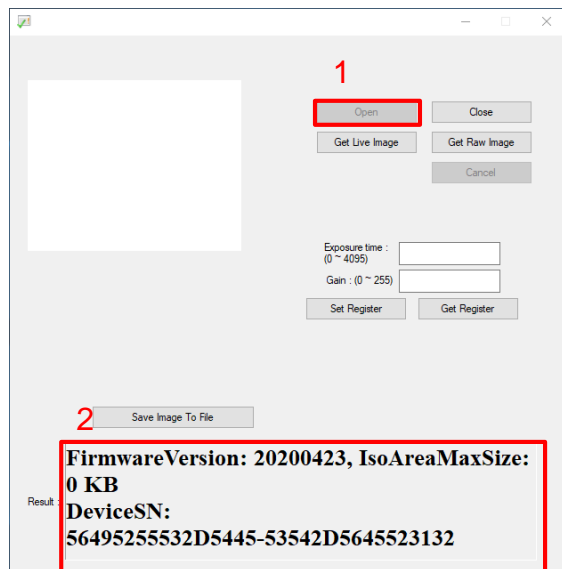

1. 點擊“Get Raw Image”
2. 取一張影像

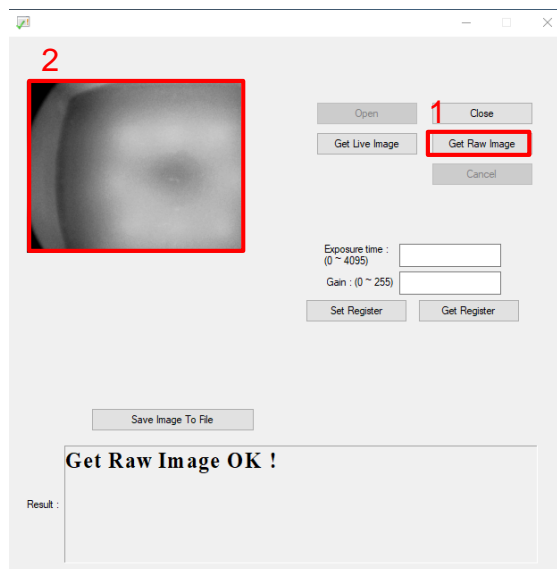

1. 點擊“Save Image To File”

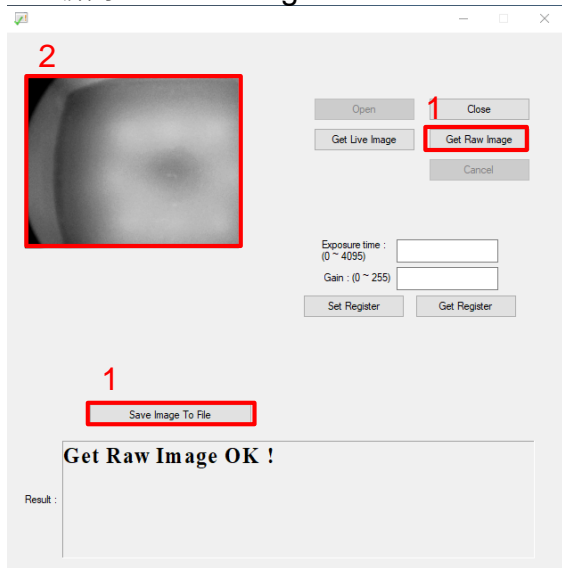

1. 選擇存檔路徑
2. 輸入檔案名稱
3. 點擊“存檔”

